

# COLCHÓN EN ESPUMA VISCOELÁSTICA

## ALOVA®

### Monobloc, multidensidad con descarga del talón



#### DESCARGA DEL TALÓN INTEGRADA


- **Funcionalidad:** disminución de los valores de presión por densidades adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Eficacia:** ayuda al tratamiento de escaras de nivel 1 y 2. Mejora del flujo vascular a nivel del talón por inclinación integrada en la zona de los pies.
- **Seguridad:** reducción al mínimo de riesgo antihigiénico por una protección integral técnicamente probada.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos del cuerpo.



## Colchón monobloque con descarga talonera




Cubrecolchón en espuma viscoelástica  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$   
Altura 6 cm

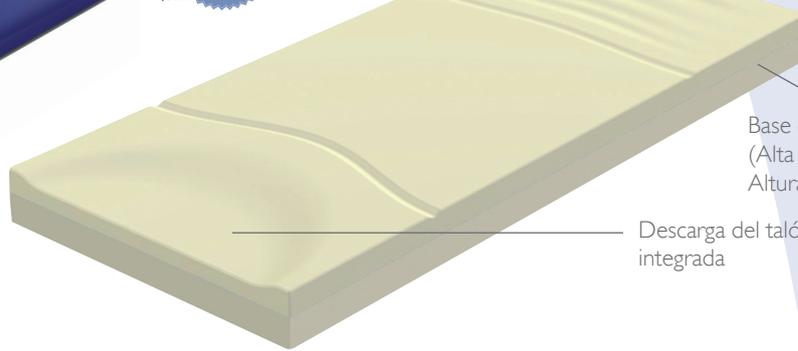

Base de Espuma HR (Alta Resiliencia)  
Altura 8 cm

Descarga del talón integrada

• Multidensidad

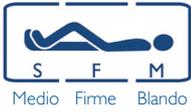

VMA64



VMA63




VMA62




• Reducción óptima de las presiones en las zonas de riesgo. Gracias a la inclinación del segmento correspondiente a la pierna, asociada a la multidensidad del colchón ALOVA.

Ejemplo: reparto de las presiones a nivel del talón en un paciente de 1,76 m y 70 kg. (Unidad: mm de Hg).

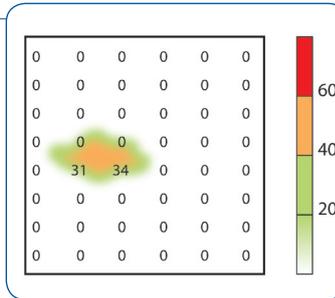

Colchón SIN inclinación del talón.

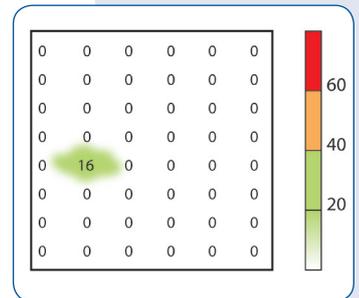

Colchón ALOVA monobloc multidensidad CON inclinación del talón.

### PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su empleo.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



### ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
- **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo. Desenrollar antes de fecha indicada en embalaje (Aprox. 6 meses)



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO			DIMENSIONES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA	PALET BOX (10 unidades)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
ALOVA DT monobloc multidensidad, funda 3 lados Promust PU	----	<b>VMA62-HIP3-I90</b>	----	<b>190x88x14</b>	<b>30 a 120 kg</b>	EN 597-1 et 2 GPEM DI 90 clase D	$\geq 75 \text{ kg/m}^3$
ALOVA DT monobloc multidensidad, funda Promust PU	VMA62C-HIP	VMA62-HIP	VMA62RCI-HIP (1 ud) VMA62RC-HIP (5 uds)	195x88x14	30 a 120 kg		
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3	----		30 a 150 kg		
ALOVA DT monobloc multidensidad, funda Promust PU HD	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX	----	30 a 150 kg			
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX	VMA64RCI-HIP (1 ud) VMA64RC-HIP (5 uds)	30 a 180 kg			
ALOVA DT monobloc multidensidad, funda CIC	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX	----	30 a 150 Kg			
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX	----	30 a 180 kg			
ALOVA DT monobloc multidensidad, funda CIC, sin descarga talón	VMA100CIC	----	----	195x97x14	30 a 150 kg		$\geq 60 \text{ kg/m}^3$

Mantenimiento Promust PU (HD) Promust CIC



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

3 años de garantía. En colectividades la garantía es de 1 año.

Fabricado por

